

# SPYCRA<sup>®</sup> Contact

Jednostranné silikonové kontaktní krytí



Chrání ránu a minimalizuje bolest při převazu

## Patentovaná silikonová technologie ReSkin

Otevřená elastická polyamidová struktura s jemnou silikonovou přilnavou vrstvou zaručuje vysokou přizpůsobivost krytí, optimální přechod exsudátu a maximální ochranu rány a okolní pokožky.




## Jak krytí funguje

- účinně chrání lůžko rány, minimalizuje traumatizaci při výměně krytí
- elastická polyamidová síťka se výborně přizpůsobí i nerovným oblastem
- vysoce porézní struktura zabezpečuje přechod exsudátu do sekundárního absorpčního krytí
- umožňuje vizuální kontrolu rány
- snižuje riziko macerace okrajů rány
- může se ponechat na ráně až 14 dní



## Indikace

- traumatické rány, abraze, lacerace
- kožní štěpy, popáleniny I. a II. stupně
- bércové vředy, dekubity
- rány ošetřované podtlakovou terapií
- chirurgické rány
- Epidermolysis Bullosa

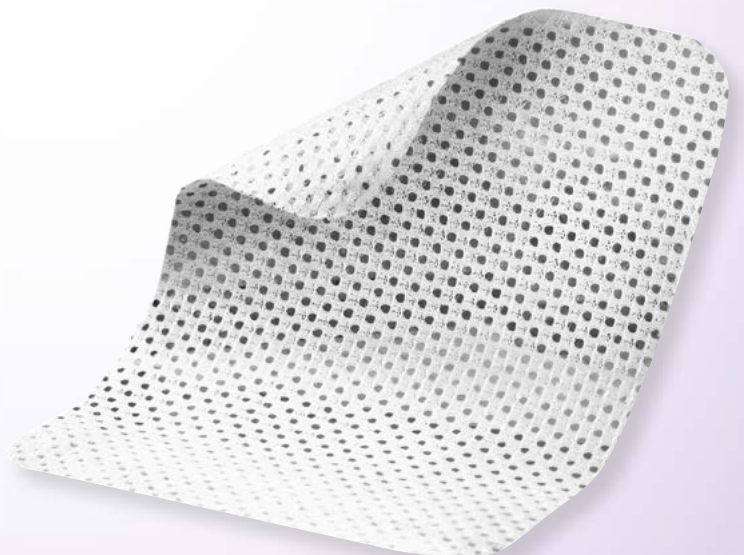

## Přehled krytí

Kód VZP	Název produktu	Balení (ks)	Úhrada ZP
0172019	<b>Contact 5 x 7,5 cm</b>	10	plně, Z*
0172021	<b>Contact 10 x 10 cm</b>	10	plně, Z*
0172022	<b>Contact 10 x 18 cm</b>	5	ZÚM+
0172023	<b>Contact 18 x 30 cm</b>	3	ZÚM+

*Z\* Po předepsání CHR, DIA, DRV, GER, INT, J16 je možné preskripci delegovat na PRL; při léčbě delší než 3 měsíce podléhá poukaz schválení revizního lékaře.  
ZÚM+ Je možné účtovat během hospitalizace jako zvlášť účtovatelný materiál.*

Spycra® Contact aReSkin Silicone Technology jsou ochranné známky společnosti ReSkin Medical NV  
**Reference:** 1. Gryson L. Et al: Cohort study comparing a standard treatment and an elastic silicone wound contact layer for the care of open wounds in combination with secondary absorbent dressings (schváleno k publikaci), 2. Data v souborech ReSkin Medical NV.